

スタンダード滅菌バッグ


蒸気滅菌 (AC) & エチレンオキシド (EO) 滅菌

安全性と使いやすさを徹底的に追求



インジケータの特色

判別しやすい色調変化

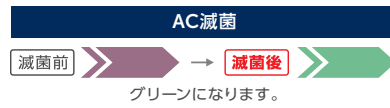

安全性に配慮

重金属などの有害な物質を使用しておりません。人と環境に優しい安全なインジケータです。

インジケータの性能に配慮

プロセスインジケータは、次の条件下で「完全変色しない(処理済みの色調に達しない)」ことが望ましいとされています。

- AC用なら121～124℃/3分±5秒間、134～137℃/0.5分±5秒間
- EO用なら30℃/5分間±15秒間、54℃/2分間±15秒間 (600±30mg/L, 60±10%RH)

製品ラインアップ

ロールタイプ

品番	外寸サイズ (mm×mm)	有効サイズ (mm×mm)	入数
KR-05	50 × 200	40 × Free	1
KR-07	70 × 200	60 × Free	1
KR-10	100 × 200	86 × Free	1
KR-15	150 × 200	130 × Free	1
KR-20N	200 × 200	170 × Free	1
KR-24N	240 × 200	210 × Free	1
KR-30N	300 × 100	270 × Free	1
KR-35N	350 × 100	320 × Free	1
KR-40N	400 × 100	370 × Free	1
KR-49N	490 × 100	460 × Free	1

ロールガゼットタイプ (マチ入り)

品番	外寸サイズ (mm×mm)	有効サイズ (mm×mm)	マチ (mm)	入数
KG-08535	85 × 200	71 × Free	35	1
KG-13550	135 × 200	121 × Free	50	1
KG-18560N	185 × 200	165 × Free	60	1
KG-23560N	235 × 100	215 × Free	60	1
KG-32080N	320 × 100	300 × Free	80	1

パウチタイプ (シール幅 10mm)

品番	外寸サイズ (mm×mm)	有効サイズ (mm×mm)	入数	梱包単位
KW-0510	50 × 100	40 × 85	2,000	100 × 20
KW-0520	50 × 200	40 × 185	2,000	100 × 20
KW-0523	50 × 230	40 × 215	2,000	100 × 20
KW-0526	50 × 260	40 × 245	2,000	100 × 20
KW-0530	50 × 300	40 × 285	2,000	100 × 20
KW-0533	50 × 330	40 × 315	2,000	100 × 20
KW-0535	50 × 350	40 × 335	2,000	100 × 20
KW-0540	50 × 400	40 × 385	2,000	100 × 20
KW-0712	70 × 120	60 × 105	2,000	100 × 20
KW-0715	70 × 150	60 × 135	2,000	100 × 20
KW-0720	70 × 200	60 × 185	2,000	100 × 20
KW-0723	70 × 230	60 × 215	2,000	100 × 20
KW-0726	70 × 260	60 × 245	2,000	100 × 20
KW-0728	70 × 280	60 × 265	2,000	100 × 20
KW-0730	70 × 300	60 × 285	2,000	100 × 20
KW-0733	70 × 330	60 × 315	2,000	100 × 20
KW-0735	70 × 350	60 × 335	2,000	100 × 20
KW-0745	70 × 450	60 × 435	2,000	100 × 20
KW-1015	100 × 150	86 × 135	2,000	100 × 20
KW-1020	100 × 200	86 × 185	1,000	100 × 10
KW-1023	100 × 230	86 × 215	1,000	100 × 10
KW-1025	100 × 250	86 × 235	1,000	100 × 10
KW-1028	100 × 280	86 × 265	1,000	100 × 10
KW-1030	100 × 300	86 × 285	1,000	100 × 10
KW-1036	100 × 360	86 × 345	1,000	100 × 10
KW-1520	150 × 200	130 × 185	1,000	100 × 10
KW-1525	150 × 250	130 × 235	1,000	100 × 10
KW-1530	150 × 300	130 × 285	1,000	100 × 10
KW-1535	150 × 350	130 × 335	1,000	100 × 10
KW-1540	150 × 400	130 × 385	1,000	100 × 10

パウチタイプ (シール幅 15mm)

品番	外寸サイズ (mm×mm)	有効サイズ (mm×mm)	入数	梱包単位
KW-2020N	200 × 200	170 × 180	500	100 × 5
KW-2025N	200 × 250	170 × 230	500	100 × 5
KW-2030N	200 × 300	170 × 280	500	100 × 5
KW-2035N	200 × 350	170 × 330	500	100 × 5
KW-2040N	200 × 400	170 × 380	500	100 × 5
KW-2525N	250 × 250	220 × 230	500	100 × 5
KW-2530N	250 × 300	220 × 280	500	100 × 5
KW-2535N	250 × 350	220 × 330	500	100 × 5
KW-2540N	250 × 400	220 × 380	500	100 × 5
KW-2545N	250 × 450	220 × 430	500	100 × 5
KW-3030N	300 × 300	270 × 280	500	100 × 5
KW-3035N	300 × 350	270 × 330	500	100 × 5
KW-3040N	300 × 400	270 × 380	500	100 × 5
KW-3540N	350 × 400	320 × 380	500	100 × 5
KW-3546N	350 × 460	320 × 440	500	100 × 5
KW-3550N	350 × 500	320 × 480	500	100 × 5

規格適合性 ISO 11607-1, ISO 11140-1, EN 868*1に適合 ※EN 868-5: 横幅100mm以上の製品が該当

過酸化水素系滅菌器用滅菌バッグ

過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌および過酸化水素ガス低温滅菌に対応

医療用パッケージ素材として優れたバリア性と強度を持つ デュポン社製タイベック®

- 小さく軽い器材を包装する幅50mm～150mmのサイズには「やや厚手」のタイベック®1059Bを使用しています。
- 大きく重い器材を包装する幅200mm以上のサイズには「厚手」のタイベック®1073Bを使用しています。

特性	試験方法	単位	タイベック® 1073B	タイベック® 1059B
			移行タイベック®	移行タイベック®
バクテリアバリア性	ASTM F1608	LRV	>5	>4
	ASTM F2638	% pMax	<0.3	<0.5
エレメントルファ引裂強度 (MD)	ASTM D1424	N	3.2	3.0
エレメントルファ引裂強度 (CD)	ASTM D1424	N	4.0	3.8

注記: MD=機械軸方向 CD=機械軸に垂直な方向 LRV=対数減少値
タイベック®は米国デュポン社の登録商標です。
Copyright © 2017 DuPont-Asahi Flash Spun Products Co., Ltd. All rights reserved.

可読性が高く、滅菌処理の有無を判断できるインジケータ

- 過酸化水素系滅菌器用のインジケータが読みやすく印字されています。
- 滅菌工程中に過酸化水素に曝露されると赤色から黄色に変色、滅菌処理の有無を容易に判断可能です。
- 滅菌工程を通過したか否かの確認、未滅菌物と既滅菌物の混合防止のインジケータとしても利用可能です。


過酸化水素滅菌

滅菌前 → 滅菌後

イエローになります。

※印刷のため、実際の色とは多少異なることがあります。

その他の優れた特長

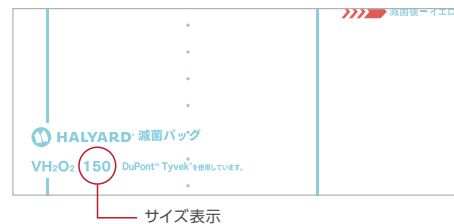


- ご注文の際に便利なよう、滅菌バッグに横幅のサイズを印刷しています。
- 市販のEO用インジケータテープなどとの併用で、EO滅菌にも使用可能です。
- スムーズに開封でき、開封時のリント発生がほとんどなく、安全かつ衛生的です。

製品ラインアップ

パウチタイプ

品 番	外寸サイズ (mm×mm)	有効サイズ (mm×mm)	入数	梱包単位
PP-07525	75 × 250	61 × 220	400	400 × 1
PP-10032	100 × 320	86 × 290	400	400 × 1
PP-15032	150 × 320	136 × 290	400	400 × 1
PP-20048	200 × 480	186 × 450	400	400 × 1
PP-20062	200 × 620	186 × 590	400	400 × 1
PP-25039	250 × 390	236 × 360	400	400 × 1
PP-25053	250 × 530	236 × 500	400	400 × 1
PP-32053	320 × 530	306 × 500	200	200 × 1
PP-32062	320 × 620	306 × 590	200	200 × 1

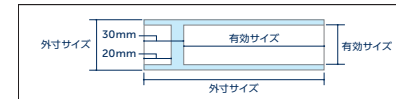

過酸化水素系滅菌器用滅菌バッグ タイベック®の厚さについて

00-00000の製品は、「やや厚手」のタイベック®1059Bを使用しています。00-00000の製品は、「厚手」のタイベック®1073Bを使用しています。


規格適合性 ISO 11607-1, ISO 11140-1, EN 868に適合

ロールタイプ

品 番	外寸サイズ (mm×m)	有効サイズ (mm×mm)	入数
PR-050	50 × 150	36 × Free	1
PR-075	75 × 150	61 × Free	1
PR-100	100 × 150	86 × Free	1
PR-150	150 × 150	136 × Free	1
PR-200	200 × 150	186 × Free	1
PR-250	250 × 100	236 × Free	1
PR-320	320 × 100	306 × Free	1
PR-430	430 × 100	416 × Free	1
PR-490	490 × 100	476 × Free	1



ロールタイプ向けディスペンサー

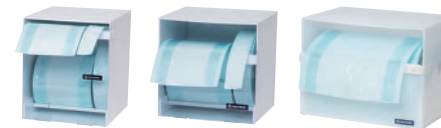

R-ボックス 250GN R-ボックス 250N R-ボックス 350NT

ハリヤード 滅菌バッグ ロールタイプ用

ハリヤード R-ボックス

段ボールからの発塵を無くし、
使いやすさと廃棄問題を考えたエコシステム

- ロールを下部で支えるタイプ^{#1}と中央で支えるタイプ^{#2}の2つのタイプよりお選びいただけます。

#1: 250N/250GN/350N/490N
#2: 250NT/350NT/490NT

ロールタイプ	ボックス名	R-ボックス 250N (幅) × (高) × (奥行) 270 × 273 × 250	R-ボックス 250GN (幅) × (高) × (奥行) 270 × 323 × 300	R-ボックス 350N (幅) × (高) × (奥行) 380 × 273 × 250	R-ボックス 490N (幅) × (高) × (奥行) 518 × 273 × 250
		R-ボックス 250NT (幅) × (高) × (奥行) 289 × 305 × 280	—	R-ボックス 350NT (幅) × (高) × (奥行) 399 × 305 × 280	R-ボックス 490NT (幅) × (高) × (奥行) 547 × 305 × 280
	KR-05/07/10/15/20N/24N	●	●	●	●
	KR-30N			●	●
	KR-35N			●	●
	KR-40N				●
	KR-49N				●
	KG-08535		●		
	KG-13550		●		
	KG-18560N		●		
	KG-23560N	●	●	●	●
	KG-32080N			●	●
	PR-050/075/100/150/200/250	●	●	●	●
	PR-320			●	●
	PR-430				●
	PR-490				●

各ボックスは●のついたロール品番に対応しています。

※仕様やサイズは予告なく変更することがあります。